

glue-u
adhesives

GUIDA AI PRODOTTI

Glue-U Adhesives is a Dutch company making innovating products for farriers and horses since 2006. Following our philosophy *“together we take care of your horse”* we designed special adhesives to glue any kind of horseshoes, acid free silicones and very fast urethane fillers for any purpose. All Glue-U products are Dutch engineered and manufactured both in Europe and USA: same quality, same performance.

Glue-U Adhesives BV

Droogdokkeneiland 8
5026SR Tilburg
The Netherlands

Tel. +31 (0)13 54 53 118

E-mail: sales@glue-u.com

Website: www.glue-u.com

TABELLA DI CONTENUTI

6

SHUFILL CUSHION

SUPER SOFT A20	8
SOFT A30	10
MEDIUM A50	12
FIRM A60	14

16

SHUFILL SILICONES

SOFT A10	18
MEDIUM-SOFT A20	20
MEDIUM-SOFT TRANSPARENT A20	22
MEDIUM A30	24
FIRM A40	26

28

SHUFILL HOOV PACKING

SUPER SOFT A15	30
SOFT A25	32
MEDIUM SOFT A35	34

36

SHUFIX

BLACK / WHITE	38
---------------	----

40

SHUFIT

BLACK / BEIGE	42
---------------	----

44

PRE FIX

48

CARTRIDGES

STORAGE	48
USE	49

50

SHUPADS

52

ACCESSORI

56

GLUSHU

MINI GLUSHU	58
APPLICATIONS	59

SHUFILL CUSHION

Morbido materiale riempitivo di sostegno, disponibile in 4 durezze: A20 super morbido - A30 morbido - A50 medio - A60 duro. Cartucce da 250ml utilizzabili con pistola da silicone standard. Offre protezione, ammortizzazione e supporto alla suola. Riempi fino a livello del suolo per casi come la laminite. L'uso della retina è consigliato ma non è obbligatorio. *Tempo di fissaggio di 35 secondi, a seconda delle condizioni meteorologiche. Temperatura ed umidità possono condizionare le prestazioni di questo prodotto.*



SUPER SOFT A20

Codice Prodotto	200120250
Descrizione	Riempitivo adesivo super morbido
Cartuccia	250cc
Colore	Trasparente
Tempo di fissaggio	35 secondi

SOFT A30


Codice Prodotto	200130250
Descrizione	Riempitivo adesivo morbido
Cartuccia	250cc
Colore	Trasparente
Tempo di fissaggio	35 secondi

MEDIUM A50

Codice Prodotto	200150250
Descrizione	Riempitivo di sostegno adesivo morbido
Cartuccia	250cc
Colore	Trasparente
Tempo di fissaggio	35 secondi


FIRM A60

Codice Prodotto	200160250
Descrizione	Riempitivo di sostegno adesivo
Cartuccia	250cc
Colore	Trasparente
Tempo di fissaggio	35 secondi

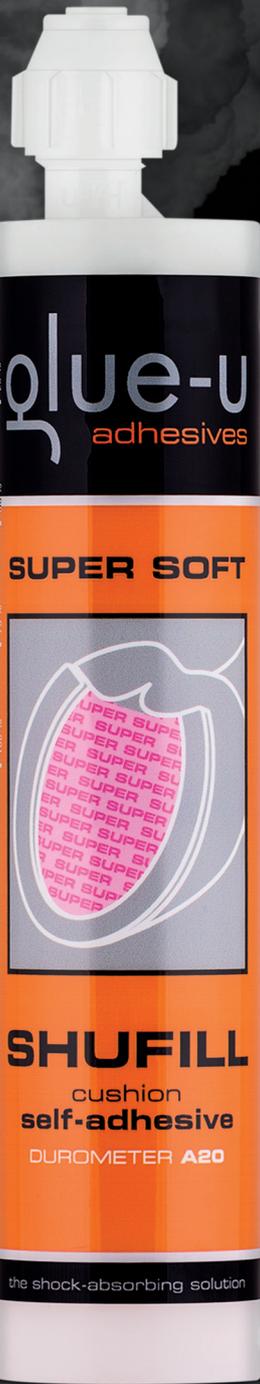

glue-u
adhesives

SUPER SOFT

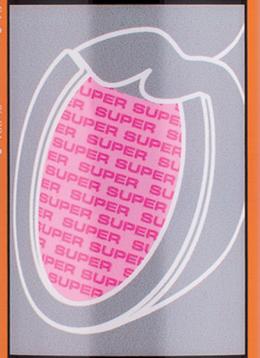

SHUFILL
cushion
self-adhesive
DUROMETER A20

the shock-absorbing solution

the shock-absorbing solution

SHUFILL
cushion
self-adhesive

SHUFILL CUSHION SUPER SOFT A20

Si tratta di un prodotto poliuretano di veloce reazione (35 secondi) da utilizzare come riempitivo per il piede, offre al maniscalco il vantaggio di prevenire l'infiltrazione di sporco tra la soletta ed il piede. Data la consistenza SuperMorbida, consigliamo l'utilizzo in combinazione con la soletta Shupad.

CARATTERISTICHE:

- Materiale riempitivo super morbido
- Resta morbido anche in condizioni di meteo freddo.
- Aderisce alla suola
- Tempo di fissaggio di 35 secondi
- Si scalda durante il fissaggio (in caso di piedi sensibili, utilizzare Shufill Silicones)

APPLICAZIONE STANDARD:


- Con Soletta

SUPERSOFT WITH PAD



GUARDA LE POSSIBILI
APPLICAZIONI



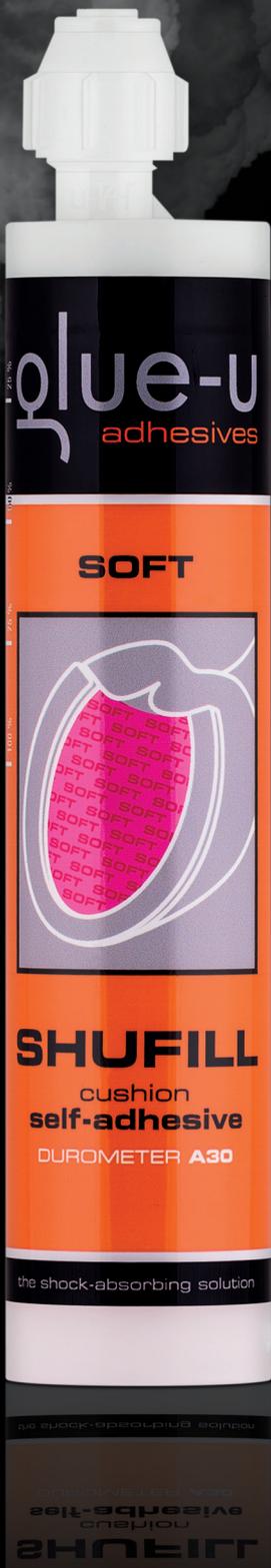

SHUFILL CUSHION

SOFT A30

Si tratta di un morbido riempitivo per il piede a fissaggio rapido che offre maggior comfort per il cavallo. Può essere utilizzato con e senza l'ausilio della soletta adesiva per riempimento, così come di solette tradizionali. Può dare ottimi benefici anche a cavalli che soffrono di laminite.

CARATTERISTICHE:

- Materiale di riempimento morbido e vibroassorbente
- Si mantiene morbido anche in condizioni climatiche fredde
- Aderisce alla suola
- Tempo di fissaggio di 35 secondi
- Si scalda durante il fissaggio (in caso di piedi sensibili, utilizzare Shufill Silicones)

APPLICAZIONE STANDARD:

- Con Soletta

APPLICAZIONE ALTERNATIVA:


- Con retina, riempito fino a livello del terreno

SOFT WITH MESH



WATCH ALL
CUSHION FEATURES



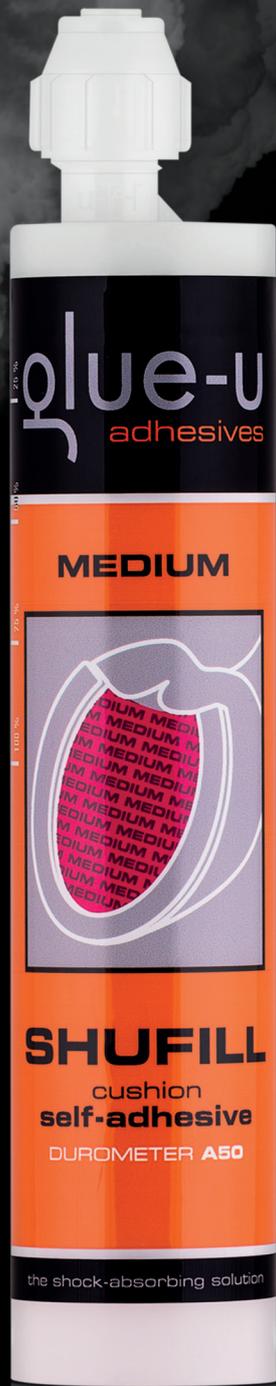

SHUFILL CUSHION

MEDIUM A50

Si tratta di un riempitivo vibroassorbente con un tempo di fissaggio di 35 secondi, utilizzato spesso per cavalli sportivi. Può essere utilizzato con una soletta o con la retina.

CARATTERISTICHE:

- Materiale di riempimento vibroassorbente mediamente duro
- Mantiene la sua consistenza per tutta la ferratura, anche in condizioni climatiche fredde
- Aderisce alla suola
- Tempo di fissaggio di 35 secondi
- Si scalda durante il fissaggio (in caso di piedi sensibili, utilizzare Shufill Silicones)

APPLICAZIONE STANDARD:

- Con Soletta

APPLICAZIONE ALTERNATIVA:


- Con retina

MEDIUM WITH MESH AND FOAM PAD




CHECK OUT THIS
APPLICATION VIDEO



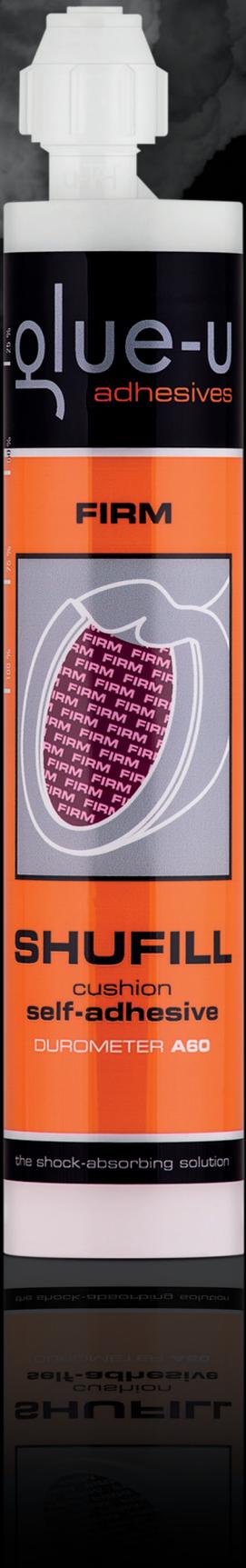

glue-u
adhesives

FIRM

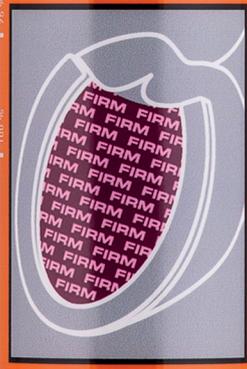

SHUFILL
cushion
self-adhesive
DUROMETER A60

the shock-absorbing solution

the shock-absorbing solution
self-adhesive
cushion
SHUFILL

SHUFILL CUSHION

FIRM A60

Shufil Cushion Duro è un prodotto riempitivo di supporto che può essere utilizzato sia su cavalli ferrati che scalzi. Grazie al supporto sulla suola, riduce la pressione sulla parete e favorisce la crescita dei talloni.

CARATTERISTICHE:

- Materiale di riempimento vibroassorbente duro
- Mantiene la sua consistenza per tutta la ferratura, anche in condizioni climatiche fredde
- Aderisce alla suola
- Tempo di fissaggio di 35 secondi
- Si scalda durante il fissaggio

APPLICAZIONE STANDARD:

- Con soletta

APPLICAZIONE ALTERNATIVA:

- Con retina

COME STRATO PROTETTIVO



SHUFILL SILICONES

Morbido materiale riempitivo di sostegno, disponibile in 4 durezze: A10 (blu) - A20 (verde e trasparente) - A30 (viola) - A40 (giallo). Cartucce da 250ml utilizzabili con pistola da silicone standard. Offre protezione, ammortizzazione e supporto alla suola. Utilizza sempre SHUFILL SHOCK ABSORBER in combinazione con solette SHUPADS! I siliconi Shufill non contengono acidi o sostanze chimiche e sono quindi molto adatti per il trattamento delle ferite. *Tempo di indurimento di 4 minuti, a seconda delle condizioni meteorologiche. Riscaldare Shufill Shock-Absorber prima dell'utilizzo, velocizza significativamente il tempo di indurimento. Temperatura ed umidità possono condizionare le prestazioni di questo prodotto.*



SOFT**A10**

Codice Prodotto	210105250
Descrizione	Prodotto riempitivo siliconico estremamente morbido
Cartuccia	250cc
Colore	Blu
Tempo di fissaggio	4 minutes (heated 2 minutes)

MEDIUM-SOFT**A20**

Codice Prodotto	210107250
Descrizione	Prodotto riempitivo siliconico molto morbido
Cartuccia	250cc
Colore	Verde
Tempo di fissaggio	4 minutes (heated 2 minutes)

MEDIUM-SOFT**A20**

Codice Prodotto	210103250
Descrizione	Prodotto riempitivo siliconico molto morbido
Cartuccia	250cc
Colore	Trasparente
Tempo di fissaggio	4 minutes (heated 2 minutes)

MEDIUM**A30**

Codice Prodotto	210109250
Descrizione	Prodotto riempitivo siliconico morbido
Cartuccia	250cc
Colore	Viola
Tempo di fissaggio	4 minutes (heated 2 minutes)

FIRM**A40**

Codice Prodotto	210104250
Descrizione	Prodotto riempitivo di sostegno siliconico mediamente duro
Cartuccia	250cc
Colore	Giallo
Tempo di fissaggio	4 minutes (heated 2 minutes)



SHUFILL SILICONES

SOFT A10

Si tratta di un prodotto da utilizzare come riempitivo per il piede, offre al maniscalco il vantaggio di prevenire l'infiltrazione dello sporco tra la soletta ed il piede. Può essere utilizzato solo come riempitivo.

CARATTERISTICHE:

- Prodotto riempitivo molto morbido
- Resta morbido anche in condizioni climatiche fredde
- Non aderisce alla suola
- Tempo di fissaggio 4 minuti
- Se riscaldato fino a temperatura corporea, il tempo di fissaggio si riduce a 2 minuti
- Mantiene una bassa temperatura durante il fissaggio
- Senza acidi

APPLICAZIONE STANDARD:

- Sempre con soletta

DIFFERENTI DUREZZE


A10 blu per il solo riempimento +

A20 verde per una leggera vibroassorbenza



CHECK OUT THIS
APPLICATION VIDEO



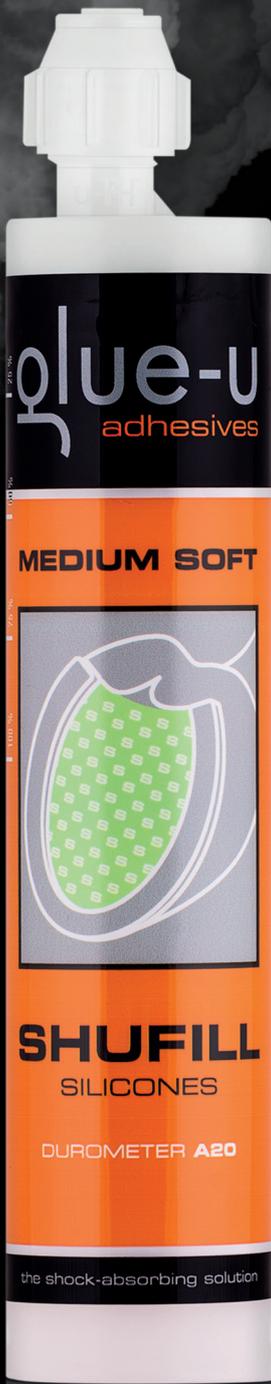

glue-u
adhesives

MEDIUM SOFT



SHUFILL
SILICONES


DUROMETER A20

the shock-absorbing solution

the shock-absorbing solution

SILICONES

SHUFILL

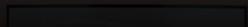

SHUFILL SILICONES

MEDIUM-SOFT A20

Si tratta di un prodotto da utilizzare come riempitivo per il piede, offre al maniscalco il vantaggio di prevenire l'infiltrazione dello sporco tra la soletta ed il piede. Può essere utilizzato come riempitivo e come prodotto leggermente vibroassorbente.

CARATTERISTICHE:

- Prodotto riempitivo/leggermente vibroassorbente morbido
- Resta morbido anche in condizioni climatiche fredde
- Non aderisce alla suola
- Tempo di fissaggio 4 minuti
- Se riscaldato fino a temperatura corporea, il tempo di fissaggio si riduce a 2 minuti
- Mantiene una bassa temperatura durante il fissaggio
- Senza acidi

APPLICAZIONE STANDARD:


- Sempre con soletta

RIEMPI COMPLETAMENTE CON SOLETTA SHUPAD




SEE POSSIBLE
APPLICATIONS



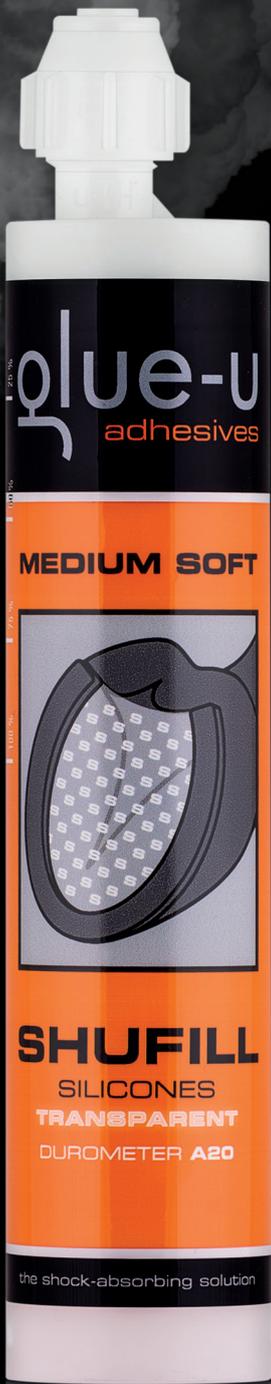

glue-u
adhesives

MEDIUM SOFT

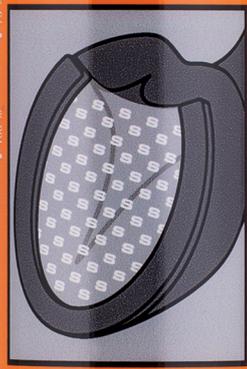

SHUFILL
SILICONES
TRANSPARENT
DUROMETER A20

the shock-absorbing solution

the shock-absorbing solution
SILICONES
SHUFILL

SHUFILL SILICONES

MEDIUM-SOFT A20 TRANSPARENT

Si tratta di un prodotto trasparente da utilizzare come riempitivo per il piede, offre al maniscalco il vantaggio di prevenire l'infiltrazione dello sporco tra la soletta ed il piede. Può essere utilizzato come riempitivo e come prodotto leggermente vibroassorbente.

CARATTERISTICHE:

- Prodotto riempitivo/leggermente vibroassorbente morbido
- Resta morbido anche in condizioni climatiche fredde
- Non aderisce alla suola
- Tempo di fissaggio 4 minuti
- Se riscaldato fino a temperatura corporea, il tempo di fissaggio si riduce a 2 minuti
- Mantiene una bassa temperatura durante il fissaggio
- Senza acidi

APPLICAZIONE STANDARD:


- Sempre con soletta

FULL FILLING WITH SHUPAD




WATCH ALL
SILICONE FEATURES



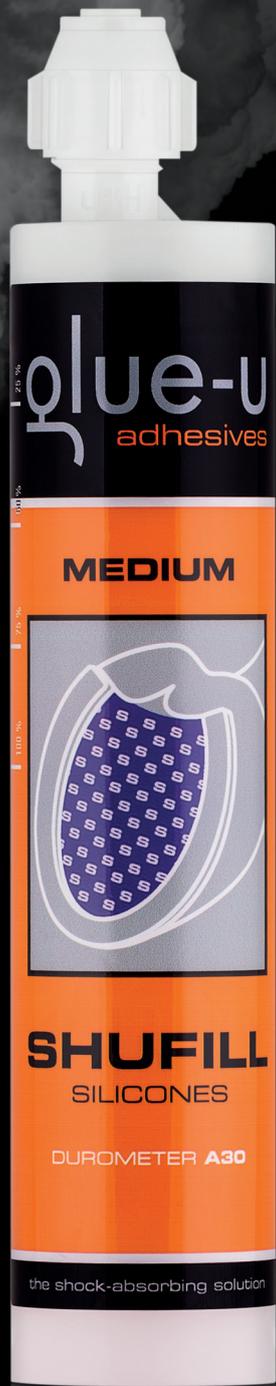

glue-u
adhesives

MEDIUM

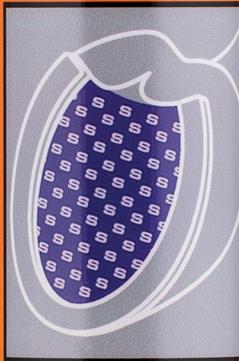

SHUFILL
SILICONES

DUROMETER A30

the shock-absorbing solution

the shock-absorbing solution

SILICONES
SHUFILL

SHUFILL SILICONES

MEDIUM A30

This silicone hoofpad material is mostly used for shock absorption. It offers more comfort to sport horses and also reduces stress on the feet for foundered horses.

CARATTERISTICHE:


- Materiale vibroassorbente di media densità
- Non aderisce
- Resta morbido anche in condizioni climatiche fredde
- Tempo di fissaggio 4 minuti
- (Se riscaldato, 2 minuti)
- Mantiene una bassa temperatura durante il fissaggio
- Senza acidi

APPLICAZIONE STANDARD:

- Sempre con soletta

REIMPIMENTO COMPLETO CON SOLETTA SHUPAD



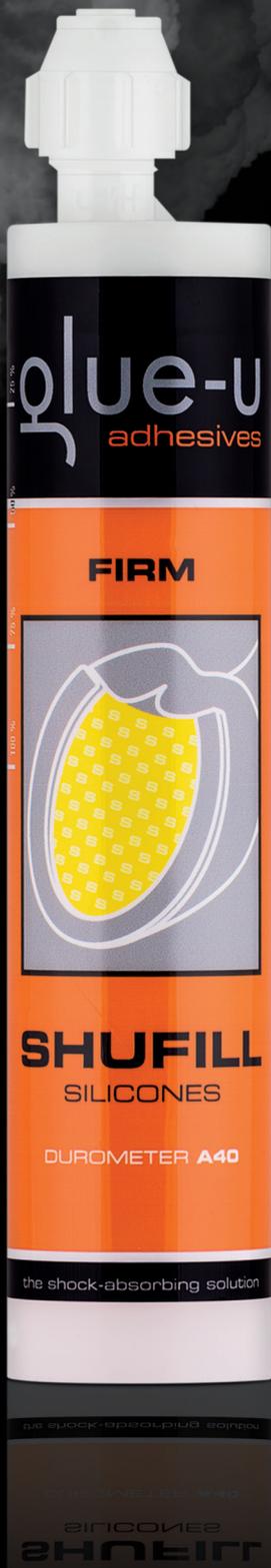

SHUFILL SILICONES

FIRM A40

Il riempitivo ad elevata densità che offre il miglior supporto per cavalli sportivi. La caratteristica vibroassorbente offre il miglior comfort a cavalli saltatore e cavalli utilizzati su superfici dure.

CARATTERISTICHE:

- Materiale vibroassorbente di densità medio rigida
- Non aderisce
- Mantiene la densità anche in condizioni climatiche fredde
- Tempo di fissaggio 4 minuti (Se riscaldato, 2 minuti)
- Mantiene una bassa temperatura durante il fissaggio
- Senza acidi

APPLICAZIONE STANDARD:

- Sempre con soletta

SOSTEGNO OTTIMALE CON SOLETTA SHUPAD



SHUFILL

HOOF PACKING

Riempitivo ammortizzante e protettivo per zoccoli dal ridotto peso specifico da mischiare con le mani. Disponibile in confezioni 2x660gr oppure 2x2.5kg ed in 3 durezze: A15 (blu) - A25 (rosa) - A35 (verde). Ideale per proteggere l'interno del piede e la superficie soldare, Facilmente miscelabile e modellabile con le mani. Shufill Hoof Packing è prodotto che non crea irritazioni. Facile da tagliare per poterlo applicare facilmente nelle situazioni più disparate. Shufill Hoof Packing non contiene acidi o sostanze chimiche ed è quindi molto adatto per il trattamento delle ferite. *Riscaldare Shufill Hoof packing prima dell'utilizzo, velocizza significativamente il tempo di indurimento. Temperatura ed umidità possono condizionare le prestazioni di questo prodotto.*



EXTRA SOFT A15

Codice Prodotto	250105660 (660 gr) / 250105025 (2500 gr)
Descrizione	Prodotto siliconico Extra Morbido da miscelare con le mani
Jar / Bucket	2x660 gr/1.5 lb / 2x2500 gr/5.5 lb
Colore	Blu
Tempo di fissaggio	4-5 minuti (riscaldato 2-3 minutei)

SOFT A25

Codice Prodotto	250106660 (660 gr) / 250106025 (2500 gr)
Descrizione	Prodotto siliconico Morbido da miscelare con le mani
Jar / Bucket	2x660 gr/1.5 lb / 2x2500 gr/5.5 lb
Colore	Rosa
Tempo di fissaggio	4-5 minuti (riscaldato 2-3 minutei)

MEDIUM A35

Codice Prodotto	250107660 (660 gr) / 250107025 (2500 gr)
Descrizione	Prodotto siliconico Medio da miscelare con le mani
Jar / Bucket	2x660 gr/1.5 lb / 2x2500 gr/5.5 lb
Colore	Verde
Tempo di fissaggio	4-5 minuti (riscaldato 2-3 minutei)



SHUFILL HOOF PACKING

A15 BLUE

Si tratta di un prodotto riempitivo Extra Morbido da miscelare con le mani. È utilizzato per riempire, per creare una leggera vibroassorbenza e/o per dare più comfort al cavallo. Dato che il prodotto è molto morbido, si può usare solo se si riempie completamente la suola. In caso di laminite o nel caso di aree della suola estremamente doloranti che necessitano di essere isolate/protette, il prodotto può essere rimosso successivamente alla polimerizzazione ed all'applicazione del ferro e della soletta.

CARATTERISTICHE:

- Riempitivo Extra Morbido
- Non tossico
- Skin friendly (non irrita e non causa reazioni allergiche)
- Tempo di reazione 4-5 min (riscaldato 2-3 min)
- Facilmente miscelabile e modellabile con le mani
- Può essere utilizzato con qualsiasi applicazione medicale alla suola

APPLICAZIONE STANDARD:

- Sempre con soletta

APPLICAZIONI ALTERNATIVE:

- Con soletta medicale/ospedaliera

MEDICAL PLATE



CHECK OUT THIS
APPLICATION VIDEO





SHUFILL HOOF PACKING

A25 PINK

E' un riempitivo morbido ed è la versione più utilizzata in questo range di prodotti. Offre una perfetta vibroassorbenza a tutta la suola o localmente come supporto al gettone in combinazione, ad esempio, con un ferro a cuore.

CARATTERISTICHE:

- Riempitivo Morbido
- Non tossico
- Skin friendly (non irrita e non causa reazioni allergiche)
- Tempo di reazione 4-5 min (riscaldato 2-3 min)
- Facilmente miscelabile e modellabile con le mani
- Può essere utilizzato con qualsiasi applicazione medicale alla suola

APPLICAZIONE STANDARD:

- Con soletta

APPLICAZIONI ALTERNATIVE:

- Localmente con ferri a traversa/chiusi (a cuore, a tavola)

FULL FILLING WITH PADS



SEE POSSIBLE
APPLICATIONS





SHUFILL HOOF PACKING

A35 GREEN

È il miglior alleato per dare supporto a tutto il piede oppure localmente al fettone. Grazie alla rigidità strutturale del prodotto, è facile utilizzarlo con tutti i tipi di ferri chiusi o solette.

CARATTERISTICHE:

- Riempitivo Duro
- Non tossico
- Skin friendly (non irrita e non causa reazioni allergiche)
- Tempo di reazione 4-5 min (riscaldato 2-3 min)
- Facilmente miscelabile e modellabile con le mani
- Può essere utilizzato con qualsiasi applicazione medicale alla suola

APPLICAZIONE STANDARD:

- Con soletta

APPLICAZIONI ALTERNATIVE:

- Localmente con ferri a traversa/chiusi (a cuore, a tavola)

FULL FILLING WITH PADS



WATCH ALL
HOOF PACKING FEATURES



SHUFIX

FISSAGGIO RAPIDO

Poliuretano adesivo molto utile per creare estensioni ai piedi dei puledri o scarpette su misura. Utilizzabile anche per ritoccare o ricostruire il tallone, creare correzioni laterali/mediali e piccole riparazioni al piede. Il piede deve essere pulito e perfettamente asciutto. Cartucce da 250ml utilizzabili con pistola da silicone standard. *Tempo di polimerizzazione tra 30 e 60 secondi, lavorabile dopo circa 5 minuti. La temperatura e l'umidità potrebbero influire sulle prestazioni di questo prodotto*



BLACK

Codice Prodotto	150102250
Descrizione	<i>Materiale da ricostruzione super rapido/ Per estensioni sui puledri</i>
Cartuccia	250cc
Colore	Nero
Tempo di fissaggio	30-60 secondi

WHITE

Codice Prodotto	150101250
Descrizione	<i>Materiale da ricostruzione super rapido/ Per estensioni sui puledri</i>
Cartuccia	250cc
Colore	Bianco
Tempo di fissaggio	30-60 secondi



SHUFIX BLACK / WHITE

Shufix è una colla per zoccoli super rapida particolarmente utilizzabile per creare estensioni ai piedi dei puledri e scarpette su misura. Utilizzabile anche per ritoccare o ricostruire il tallone, creare correzioni laterali/mediali e piccole riparazioni al piede. In condizioni climatiche invernali estreme, Shufix può essere utilizzato per incollare la maggior parte di ferri/ scarpette da incollare. Dato che si tratta di un prodotto poliuretano, il piede deve essere asciutto e pulito prima di applicare Shufix.

CARATTERISTICHE:

- Disponibile nero e bianco
- Tempo di fissaggio super rapido (30 - 60 secondi)
- Facile da raspare
- Materiale duro ma flessibile
- Alta temperatura durante il fissaggio (mantenere +/- 1 cm dalla corona)

APPLICAZIONE STANDARD:

- Estensioni per il piede

APPLICAZIONI ALTERNATIVE:

- Incollaggio di ferri/scarpette
- Riparazione alla muraglia in condizioni climatiche molto fredde
- Protezione temporanea Alzamento dei talloni

HOOF EXTENSION



CRACK REPAIR
APPLICATION VIDEO



SHUFIT

GLUE ON SHOE

Adesivo acrilico per incollare tutti le tipologie di ferri e per ricostruzioni della muraglia. Disponibile in cartucce da 150ml e 420ml, in colore nero e beige. Utilizzabile con pistola per silicone standard attraverso l'adattatore, oppure utilizzabile con la pistola erogatrice Glue-U per cartucce da 150 ml. Versione da 420 ml utilizzabile solo con pistola erogatrice specifica. Incolla ferro, alluminio ed anche ferri/scarpette poliuretaniche. Utilizzabile per la riparazione di rotture/setole di grandi dimensioni e per creare estensioni. *Tempo di impostazione iniziale: 90-120 sec (tempo aperto). Tempo di fissaggio totale 4-5 minuti (anche a basse temperature). La temperatura e l'umidità potrebbero influire sulle prestazioni di questo prodotto. Riscaldare Shufit prima dell'uso accelera notevolmente il tempo di presa.*



BLACK

Codice Prodotto	<i>100102150 / 100102420</i>
Descrizione	<i>Adesivo per ferri/scarpette e per ricostruzioni</i>
Cartuccia	<i>150cc / 420cc</i>
Colore	<i>Nero</i>
Tempo di fissaggio	<i>4-6 minuti / pronto a sostenere il carico 7-8 minutes Riscaldato; 120-180 secondi</i>

BEIGE

Codice Prodotto	<i>100114150 / 100114420</i>
Descrizione	<i>Adesivo per ferri/scarpette e per ricostruzioni</i>
Cartuccia	<i>150cc / 420cc</i>
Colore	<i>Beige</i>
Tempo di fissaggio	<i>90-120 secondi / pronto a sostenere il carico 4-5 minutes Riscaldato; 45-75 seconds</i>



SHUFIT BLACK / BEIGE

L'adesivo acrilico Shufit è il collante più versatile utilizzato nel settore equino. Può essere utilizzato per incollare qualsiasi tipo di ferro/scarpetta o per fare riparazioni, dalla più piccola alla più estrema. Grazie alle sue ottime caratteristiche, può essere mischiato a mano oppure utilizzato facilmente con le canule Glue-U per un mescolamento perfetto. Shufit può essere anche riposizionato da una zona all'altra durante il processo di reazione chimica. Per esempio spostare del prodotto in eccesso dove serve aggiungere del collante.

CARATTERISTICHE:

- Disponibile in nero ed in beige
- Cartucce da 150cc utilizzabili con pistola per silicone standard
- Miscelabile a mano o con le canule
- Adesione molto alta
- Facilmente raspabile Duro ma flessibile
- Tempo di settaggio velocizzabile se riscaldato

APPLICAZIONE STANDARD:

- Incollaggio ferri/scarpette

APPLICAZIONI ALTERNATIVE:

- Riparazione/ricostruzioni della muraglia

GLUE-ON GLUSHU



CHECK OUT THIS
APPLICATION VIDEO



PRE FIX SUPER GLUE

Prefix è un sistema per incollare la scarpetta GluShu al piede del cavallo al fine del solo posizionamento. È un adesivo bicomponente che ti permetterà di incollare GluShu al piede in pochi secondi. Questo ti permetterà di effettuare il normale processo di incoraggio del ferro con il piede posizionato a terra. Prefix è molto utile se si lavora con un cavallo particolarmente nervoso o con un cavallo incapace/impossibilitato a reggersi in piedi su 3 zampe (laminiti o infortuni). *Prefix non è una colla strutturale. Ha un effetto temporaneo per mantenere Glushu in posizione per il tempo di cui hai bisogno affinché la colla strutturale abbia fatto presa. Un componente è l'attivatore spray, l'altro è un gel trasparente in una bottiglietta da spremere.*



ACTIVATOR

Codice Prodotto	490100200
Descrizione	<i>Pre glue Glushu in combinazione con Pre fix CA glue</i>
Cartuccia	200cc / 6.76 oz
Colore	Trasparente
Tempo di fissaggio	15 sec

CA GLUE

Codice Prodotto	490101100
Descrizione	<i>Pre incolla Glushu in combinazione con Pre fix attivatore</i>
Cartuccia	150 gr / 5.29 oz
Colore	Trasparente
Tempo di fissaggio	15 sec



PRE FIX

Prefix viene usato in 2 passaggi. Non appena hai sagomato Glushu e sei pronto per incollare, applica la colla Prefix in accordo con le video istruzioni e rilascia il piede sul terreno per permettere l'incollaggio strutturale con Shufit non appena Glushu è unito al piede.

CARATTERISTICHE:

- Colla super rapida (15 secondi)
- Incolla non appena i due componenti entrano in contatto

APPLICAZIONE STANDARD:

- Solo per il pre-incollaggio di Glushu

PRE FIX GLUSHU



CHECK OUT THIS
APPLICATION VIDEO



CARTUCCIA

CONSERVAZIONE

DA FARE

Mantenere al riparo dal gelo.

Conserva Shufit ad una temperatura di circa 10 °C.

Conserva Poliuretanicici e Siliconici ad una temperatura di circa 15°C.

Conserva i prodotti in un luogo asciutto.

Utilizzare con il metodo "il primo comprato è il primo da utilizzare".

Mantieni le cartucce in posizione verticale.

Possibilità di utilizzare la canuta di miscelazione come tappo.

DA EVITARE

Conservare il prodotto in luoghi con significative variazioni termiche.

Conservare le cartucce usate dietro quelle nuove.

Aprire la cartuccia per un paio di minuti.

Lasciare la cartuccia aperta dopo l'utilizzo.

CARTUCCIA

UTILIZZO

DA FARE

Controlla il livello di entrambi i componenti.

Assicurati che entrambi i canali di uscita siano liberi.

Prima dell'utilizzo, fuoriesci un poco di prodotto in un bicchierino per assicurarti che il mix sia corretto, prima di posizionare la canula.

Assicurati che il prodotto sia miscelato correttamente prima di procedere all'applicazione sul piede.

Lavora in spazi aperti e ben ventilati.

Indossa occhiali e guanti protettivi.

Pareggia normalmente, il pareggio è la parte più importante del tuo lavoro.

Durante l'incollaggio, mantieni il piede sollevato fino a che la colla abbia compiuto la polimerizzazione. (Tempo di reazione variabile in base alla temperatura ed all'umidità)

DA EVITARE

Non annusare od inalare direttamente il prodotto.

Se in contatto con la pelle, il prodotto può causare reazioni allergiche.

Non utilizzare su ferite o pelle aperta.


Usa troppa colla in una volta. Più colla fa più calore.

Evita la colla su suola e fettone.

Non riscaldare le cartucce in acqua calda. Usa esclusivamente aria calda.

SHUPADS

La base per i siliconi e i prodotti ad impressione. Queste solette trasparenti sono disponibili in 4 differenti tipologie: M ed XL piatte, L piatte e rialzate con supporto per il fettone. Facili da tagliare e da adattare ad ogni piede. Utilizza nella nostra tabella delle misure per individuare quella più vicina alla tua necessità. Il poliuretano di alta qualità utilizzato, assicura l'assenza di limitazioni per la biomeccanica del piede e mantiene i riempitivi in posizione. *L'esperienza ha provato che le solette Glue-U Shupads sono molto durevoli e possono essere quindi utilizzate per un lungo periodo. Ogni Shupad è dotato di fori per iniezione a chiusura automatica. È più facile usare i riempitivi con le solette Glu-U Shupads.*

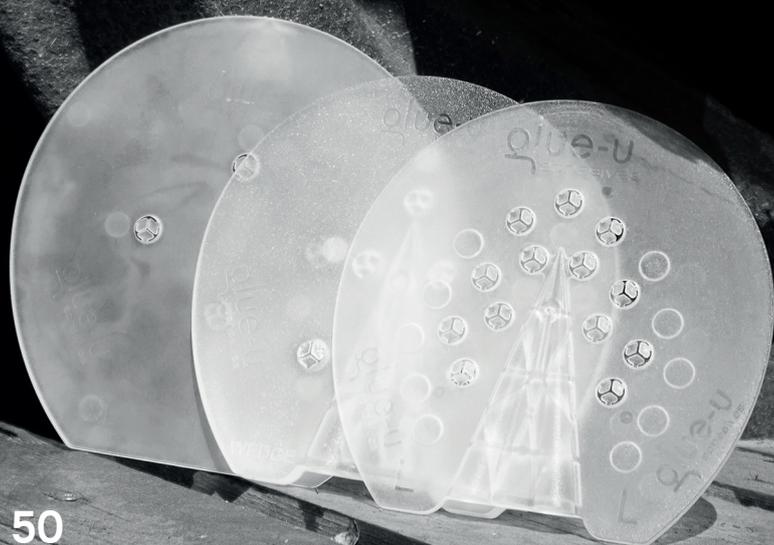

FLAT FLEX

Codice Prodotto	810050010
Descrizione	Soletta piatta con 4 fori per iniezione
Quantità	10 pz (Medium)
Colore	Trasparente
Tempo di fissaggio	150 x 155 mm 5.9 x 6.1"

FROG SUPPORT FLEX

Codice Prodotto	810060006
Descrizione	Solette piatta con fori per iniezione multipli e supporto per il fettone
Quantità	10 pz (Large)
Colore	Trasparente
Tempo di fissaggio	165 x 165 mm 6.5 x 6.5"

FLAT FLEX

Codice Prodotto	810070010
Descrizione	Solette piatta con 4 fori per iniezione
Quantità	10 pz (Extra Large)
Colore	Trasparente
Tempo di fissaggio	180 x 180 mm 7.08 x 7.08"

WEDGE

Codice Prodotto	810060006
Descrizione	Soletta rialzata con fori per iniezione multipli e supporto per il fettone
Quantità	6 pz (Large)
Colore	Trasparente
Tempo di fissaggio	165 x 165 mm 6.5 x 6.5" 3° wedge; 10 mm 0.4"



ACCESSORI ATTREZZI



ADATTORE

Codice Prodotto	490002001
Descrizione	To fit 150cc Shufit in a normal dispenser
Quantità	1 pz



PISTOLA EROGATRICE PER SHUFIT 150cc

Codice Prodotto	827100150
Descrizione	150cc Pistola erogatrice
Quantità	1 pz



PISTOLA EROGATRICE PER SHUFIT 420cc

Codice Prodotto	827100420
Descrizione	420cc Pistola erogatrice
Quantità	1 pz



PISTOLA EROGATRICE UNIVERSALE

Codice Prodotto	820000000
Descrizione	150 & 250cc Pistola erogatrice
Quantità	1 pz



DRAW KNIFE

Codice Prodotto	490000002
Descrizione	Coltello per la rimozione di GluShu
Quantità	1 pz



SOLETTE ADESIVE

Codice Prodotto	810001020
Descrizione	Solette adesive 199 x 199 mm / 7.85 x 7.85"
Quantità	20 pz



FILM PER AVVOLGIMENTO A MANO

Codice Prodotto	890503001
Descrizione	Pellicola per avvolgere gli zoccoli
Quantità	1 pz



ADATTATORE PER PELLICOLA AVVOLGI ZOCCOLI

Codice Prodotto	890512001
Descrizione	Pellicola avvolgi zoccoli
Quantità	1 pz



RISCALDATORE PER CARTUCCE

Codice Prodotto	890312150 / 890312420
Descrizione	Box scalda colle 12V, 110V 150cc & 250cc / 420 cc
Quantità	1 pz



RETINA

Codice Prodotto	892002010
Descrizione	Retina per Shufill Cushion 2500 x 200 mm / 98.5 x 7.9"
Quantità	1 pz




MIXING TIP

Codice Prodotto	610007010
Descrizione	Canula verde quadrata
Quantità	10 pcs



SHUCLEANER

Codice Prodotto	490000750
Descrizione	Pulitore per zoccoli privo di Acetone
Quantità	750cc

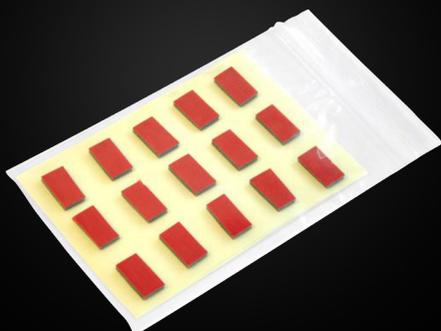

SPACER TAPE

Codice Prodotto	891002010
Descrizione	Nastro speciale per mantenere spazio tra piede e ferro
Quantità	15 pz



SHUFIT DYE

Codice Prodotto	891002001
Descrizione	Colorante nero per Shufit Da beige a nero
Quantità	1 pz



PIASTRE DI CORREZIONE

Codice Prodotto	420290075 / 420290085 / 420290095
Descrizione	Piastre di estensione Mini Glushu per tutti i tipi di estensioni
Quantità	2 pz



INSERTI PER GLUSHU E MINI GLUSHU

Codice Prodotto	Disponibile in tutte le misure
Descrizione	Supporto per fettone, rialzi ed inserti per Glushu
Quantità	2 pz

GLUSHU

FERRO DA INCOLLARE

Glushu è una scarpetta vulcanizzata attorno ad un ferro in alluminio specialmente disegnato. Questa soluzione dà al cavallo un ferro leggero, che dà supporto al piede ed ammortizzazione, elimina ogni stress o danno al piede del cavallo ed è facile da applicare. GLUSHUS non sono invasive, eliminano completamente il rischio di infortunio da inchiodatura. Facili e veloci da applicare. Disponibili in paia o kit. Utilizza una colla ad azione rapida. *Ti consigliamo vivamente di utilizzare la colla Glue-U Shufit che è specificamente progettata per essere utilizzata con GluShu. La sua struttura permette di incollare la scarpetta in più fasi. Non sono necessarie attrezzature speciali. Sistema di misure semplice e ampia gamma di taglie. Nessuna modifica necessaria. Elimina il rischio di stress quando si inchioda in una sottile linea bianca o in una muraglia debole. Ammortizza i piedi. Previene ulteriori danni alla parete dello zoccolo.*



GLUSHU KITS & PAIA

Il kit contiene tutto il necessario per incollare una coppia di Glushu;

1x paio di GluShu

1x Shufit 150cc

1x Adattatore

4x Canule

MISURA KIT	Codice prodotto
4x0 Front	410290040
3x0 Front	410290030
00 Front	410290020
0 Front	410290010
1 Front	410290001
2 Front	410290002
3 Front	410290003
4 Front	410290004
2x0 Hind	410291020
0 Hind	410291010
1 Hind	410291001
2 Hind	410291002
3 Hind	410291003

MISURA PAIA	Codice prodotto
4x0 Front	400290040
3x0 Front	400290030
00 Front	400290020
0 Front	400290010
1 Front	400290001
2 Front	400290002
3 Front	400290003
4 Front	400290004
2x0 Hind	400291020
0 Hind	400291010
1 Hind	400291001
2 Hind	400291002
3 Hind	400291003

MINI GLUSHU

FERRO PER PULEDRI

Mini Glushu è una versione più piccola della versione standard di Glushu, alzabile sugli anteriori così come sui posteriori. Questo ferro da incollare è veramente facile da utilizzare per puledri o pony Shetland. È un ferro versatile con molte opzioni. Può essere facilmente accoppiato con le estensioni e gli inserti Mini Glushu.

Per gli utenti che applicano solo Mini Glushus offriamo anche un kit di applicazione che include tutto il necessario per incollare su circa 5 set di Mini Glushu

Kit di applicazione;
1x Shufit 150cc
1x Adattatore
1x Set Pre fix
10x Canule

MISURA PAIA	Codice prodotto
75 mm / 2.95"	400290075
85 mm / 3.35"	400290085
95 mm / 3.74"	400290095

PRODUCT	Codice prodotto
Kit di applicazione	410290000
Piastre di correzione	420290075 420290085 420290095

APPLICAZIONI

Glushu è un ferro da incollare con utilizzo molto simile comparato a tradizionali ferri in ferro/alluminio. Può essere applicato in qualsiasi situazioni in cui inchiodare è difficile, impossibile, o non desiderato. Glushu si incolla alla muraglia. Questo significa che le limitazioni sui meccanismi del piede sono molto ridotti. Glushu può anche essere combinato con tutti i riempitivi Glue-U Shufill o gli inserti Glushu combinati con Hoofpacking Shufill o con i Siliconici. Glushu può essere facilmente rimodellato, molato, ecc ...

APPLICAZIONE STANDARD:

Glushu anteriore o posteriore.
Se necessario combinato con Shuffle Cushion o con gli inserti.

ECCO IL LINK PER LA VIDEO APPLICAZIONE - PAGE 43



VIDEO ISTRUZIONI
DI MODIFICA





**APPLICAZIONE
ALTERNATIVA:**

Ferro anteriore Glushu + aletta anteriore della scarpetta ritagliata per riposizionare il punto di breakover. Se necessario, la superficie a contatto con il terreno di Glushu può anche essere molata per ottenere una forma rotonda

**APPLICAZIONE
ALTERNATIVA:**

Ferro Glushu posteriore + aletta anteriore della scarpetta ritagliata per essere utilizzata come ferro a punta aperta. I talloni possono anche essere molati a forma rotonda per un migliore roll-over.



**APPLICAZIONE
ALTERNATIVA:**

Glushu in combinazione con la retina o una soletta per applicare prodotti riempitivi. La retina o la soletta devono essere incollate appena prima dell'applicazione.



MINI GLUSHU PIASTRE DI ESTENSIONE:

Mini Glushu accoppiate con le piastre di estensione prima dell'incollaggio al piede, per ogni tipo di correzione della postura.




APPLICAZIONE MINI GLUSHU:

Mini Glushu combinato con una soletta e Shufill Hoofpacking per ridurre il più possibile lo stress sulla suola. La punta danneggiata viene tenuta aperta per garantire la disinfezione e la pulizia quotidiana.

APPLICAZIONE GLITTER GLUSHU:

Quel momento in cui ricevi la richiesta di renderlo un Glushu glitterato/brillantinato. Questo è solo uno speciale Glushu per coloro a cui piace rispondere alla richiesta di glitter/brillantini. Anika Ridgeway mostra come modificare Glue-U Shufit per ottenere l'aspetto desiderato.

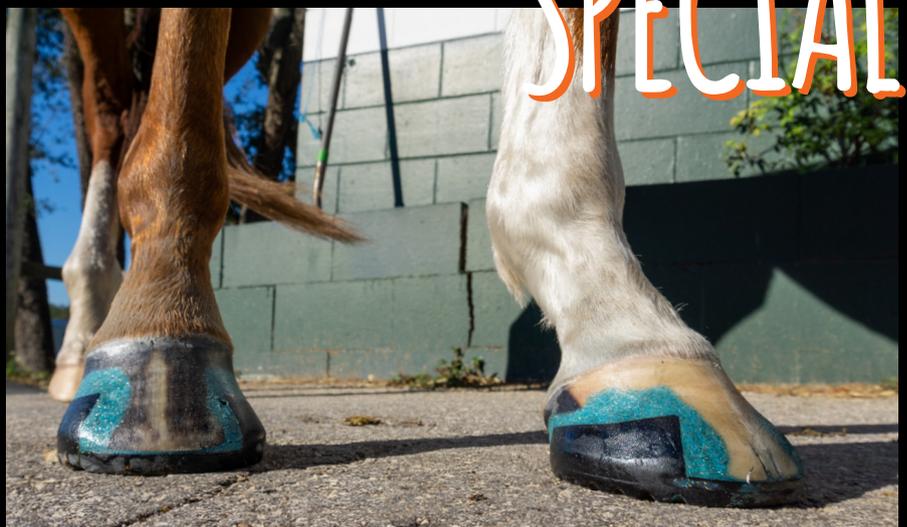

Glue-U Adhesives BV

Droogdokkeneiland 8
5026SR Tilburg
The Netherlands

Tel. +31 (0)13 54 53 118

E-mail: sales@glue-u.com

Website: www.glue-u.com